

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

カラダの内から、元気になる。



頭痛に

肩こりに

不眠症に

慢性便秘に

movas

モーヴァス



家庭用電位治療器 販売名:モーヴァス

電位治療とは？

電位治療器は、1秒間に50回(または60回)のプラスとマイナスが入れ替わる数千ボルトの交流の高電位を作り出します。この高電圧を絶縁状態におかれた人体にかけることにより、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘に効果があります。

9000Vのヘルシーライフ、はじまる。

—高品位モデル— 健康のリズムを奏でる『モーヴァス』誕生。

最大波高値 14,000Vp、最大実効値 9,000Vrms をしっかり治療に生かす、それが新開発モーヴァスのOVAシステムです。

〈電位出力フィードバック制御〉

いつでも、よりよい電位出力を保持

電位出力は使用する場所や姿勢などの負荷条件によって下がります。

そこでマルタカ独自の出力フィードバック制御が電位出力の低下を補正し、効果的な治療を実現します。

Marutaka
Output
Voltage
Adjustment
System




※絶縁シートを2枚並べて敷き、その上に布団を敷いて、通電シートをご使用ください。



ゆったり、じっくり、長時間治療

じっくり治療できる800Vの低電圧長時間コースをご用意。1～8時間の設定ができるタイマーで、横になりながら治療が行えます。

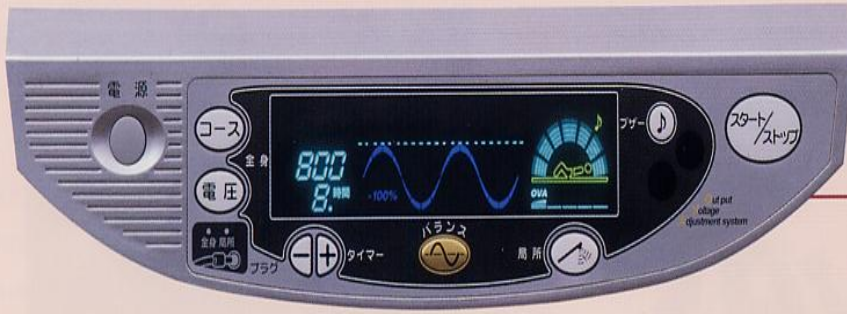

大型パネル&便利機能

■大型蛍光表示

明るいカラー表示で、作業状況がとても見やすい大型パネル。操作もワンタッチで簡単です。

■メモリー機能

前回の治療内容(電圧、コース、出力、バランス、タイマー設定)をあなたに代わって記憶します。

■明るさセンサー

周囲の明るさを感知して、表示輝度を自動的に調整。お部屋を暗くしてお使いいただく場合も、パネルの眩しさが気になりません。

■ジャック自動認識

プラグの差し込み時に通電シートと電子ペンを自動認識して、お知らせします。

■安全装置

タイマー機能、漏電防止機能、過電流保護機能など機械の安全性を確保する機能が充実しています。

■アラーム機能

誤作動や機械的な異常、また自動コース終了時など作業状況をやさしいアラーム音でお知らせします。


(バランス切替機能)

体調に合わせて3段階切替え

その日の体調に合わせて。出力バランスを3段階(50/-75/-100%)から選べます。一人ひとりに適した治療が行えるマルタカ新開発の機能です。

●3つのバランス

*波高値の正負比率

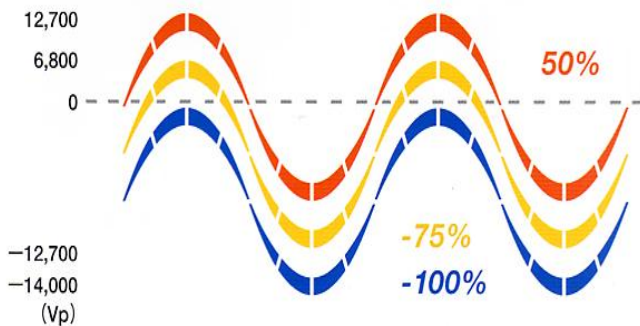

30パターンの多彩な選択


通電シートを使った全身治療では、バランス切替 × 電圧(9000/6000/3000/800V)、バランス切替 × 自動コース、それぞれの組合せによって24パターンの治療が行えます。

電子ペンによる局所治療は、バランス切替 × 電圧(1500/800V)の組合せで6パターンの治療が行えます。


慣れを防ぐ、4つの自動コース

電圧の自動変化が異なる、4タイプのコースをお好みで選択できます。


Aコース

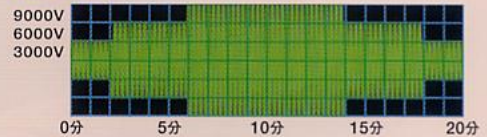


Bコース

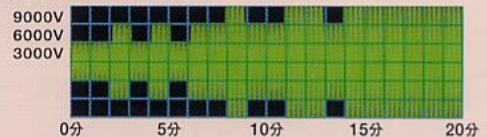

Cコース

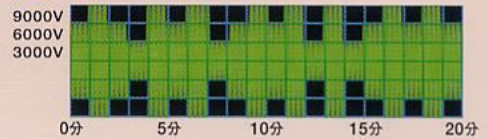

Dコース

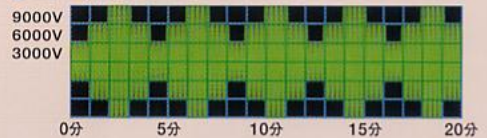

電子ペンで局所治療

首筋や肩などの疲れやすい局所の治療には、電圧を集中させる電子ペンが効果的です。ペン先を使ったポイント治療も、ローラーでのムラのない治療も可能。電圧は1500Vと800Vの2段階切替ができます。



●ペン先で



●ローラーで

医療機器の区分	管理医療機器
一般名称	家庭用電位治療器(JMDN:70987000)
販売名	モーヴァス
機種名	EPR-03M
本体寸法	幅400mm×奥行き225mm×高さ315mm
本体重量	約10kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	15W
出力(通電シート)	自動コース:A/B/C/Dコース バランス:50/-75/-100% 電圧出力:9000/6000/3000/800V
出力(電子ペン)	バランス:50/-75/-100% 電圧出力:1500/800V
タイマー	全身高電圧:10~60分 全身低電圧:1~8時間 局所:5~15分
医療機器認証番号	21700BZZ00060A01
JANコード	4969173181014
安全装置	タイマー、漏電停止回路、過電流保護回路
標準小売価格	580,000円(税別)